



实验室仪器的升级换代产品

理想的实验室伙伴

持之一恒

耐腐蚀真空干燥箱 ◆ 药物真空干燥箱 新产品

耐腐蚀真空干燥试验箱 ◆ 药物真空干燥试验箱

用途概述

本产品适用于化学天然物质提取，中药材成分提取，具有酸碱腐蚀性的物品的真空干燥，箱体内置耐腐蚀隔膜真空泵，内胆采用316不锈钢，具有高的耐腐蚀性能。

产品特点

- 工作室采用316不锈钢材质，好耐腐蚀，确保产品经久耐用，便于清洁；
- 长方形真空室，使有效容积大，能充分利用空间；
- 弹性双层钢化玻璃门观察工作室内物体，一目了然；
- 箱门闭合松紧可调节，整体成型的合成硅橡胶门密封圈，确保箱内高真空度；
- 增设超温保护温控口，有效的防止温度失控等安全问题；（选配）
- 采用低噪音、无污染耐腐蚀隔膜泵，真空控制稳定可靠，同时不会对回收物造成污染；

程序控制

- 程序控制操作，可根据工艺需求设定加热、真空保持和氮气保持时间，确保每批次烘烤一致性，降低产品的烘烤差异性；

选购件:(增加选购件交货期7天)

- 1、惰性气体进气阀..... ¥ 500元
- 2、液态水过滤器(按规格型号定价, 适用高温干燥用)..... ¥ 700元
- 3、干燥罐..... ¥ 550元

技术参数

技术指标	型号	耐腐蚀真空干燥箱 耐腐蚀真空干燥试验箱			药物真空干燥箱 药物真空干燥试验箱			
	BPZ-6065	BPZ-6095	BPZ-6215	BPZ-6064C	BPZ-6094C	BPZ-6124C	BPZ-6216C	
电源电压	AC220V 50HZ							
输入功率	1800W	1350W	2100W	1800W	1350W	2050W	2100W	
控温范围	RT+10 ~ 200℃			RT+10 ~ 65℃				
温度分辨率/ 波动度	0.1℃ /±1℃							
达到真空度	8mbar			8mbar				
真空泵	耐腐蚀隔膜泵			耐腐蚀隔膜泵				
真空表	机械指针式							
工作环境温度	+ 5 ~ 40℃							
内胆尺寸(mm) W×D×H	400×400×400	450×450×450	560×600×640	400×400×400	450×450×450	500×500×500	560×600×640	
外形尺寸(mm) W×D×H	600×570×1390	610×590×1350	720×820×1750	600×570×1390	610×590×1350	660×640×1400	720×820×1750	
搁板	2块	2块（独立控温）	3块（独立控温）	2块	2块（独立控温）	3块	3块（独立控温）	
工作室材料	不锈钢316(1Cr ~ 18Ni9Ti)							
价格	RMB28900	RMB39900	RMB59900	RMB26900	RMB36900	RMB46900	RMB56900	


※性能参数测试在空载条件下为：环境温度20℃，环境湿度50%RH

- 注：1、耐腐蚀真空干燥（试验）箱/药物真空干燥（试验）箱配有耐腐蚀隔膜泵；
2、可升级为不锈钢外壳，加收市场价15%，交货期为20天；

化学专用

药物专用

程式温度
控制器，带
直联真空泵
和电气阀门

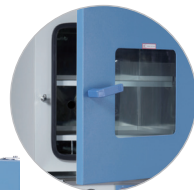

01 生化/霉菌培养箱

05 低温培养箱

06 多通道生化/霉菌培养箱

07 生物安全低温培养箱

08 半导体制冷低温培养箱

09 恒温培养箱

12 隔水式恒温培养箱

13 生物安全培养箱

14 多通道恒温/微生物培养箱

15 CO₂培养箱

21 光照培养箱/人工气候箱

28 恒温恒湿箱

33 回旋振荡器

35 恒温振荡器

37 大型恒温振荡器

38 落地振荡器

40 摇瓶机

41 叠加式-振荡培养箱

44

45 超低温冰箱

47 低温冷藏箱

48 液相液氮罐

50 干式运输液氮罐

51 生物安全柜

52 洁净工作台

54 干燥箱

60 真空干燥箱

68 加热循环槽

71 恒温振荡水槽

74 油浴锅

76 恒温水槽与水浴锅

77 药品稳定性试验箱

83 步入式药品实验室

84 老化试验箱

84 热空气消毒箱

85 高低温(交变)试验箱

87 高低温(交变)湿热试验箱

89 紫外耐候试验箱

91 氙灯耐候试验箱

92 盐雾腐蚀试验箱

93 电阻炉

96

97 旋转蒸发器

100 循环水真空泵

101 耐腐蚀隔膜泵

102 循环冷却器

103 干式冷阱

104 磁力搅拌器

108 顶置电动搅拌器

109 氮吹仪

110 离心机

110 漩涡混合仪

111 多管漩涡混合仪

112 孵育器/金属浴

114 微孔板迷你离心机

115 均质分散机

117 粘度计

122

耐腐蚀药物真空干燥箱

耐腐蚀药物真空干燥箱